

## SOROTECA

### 8.1. Amostras


Neste módulo estão concentradas as rotinas de: lançamento dos tubos nas estantes. Desprezo dos tubos vencidos e gerenciamento físico das geladeiras: entende-se isto pelo descarte das amostras desprezadas e a guarda das estantes lançadas.

Trata-se de um tipo de controle de estoque, cujo objeto a ser armazenado e controlado, são tubos de ensaio e suas estantes.

#### 8.1.1. Colocar na Geladeira

Colocar na geladeira é a função em que efetivamente a estante é colocada na geladeira para estocagem das amostras.

#### 1) Acessar o **Módulo Soroteca**.

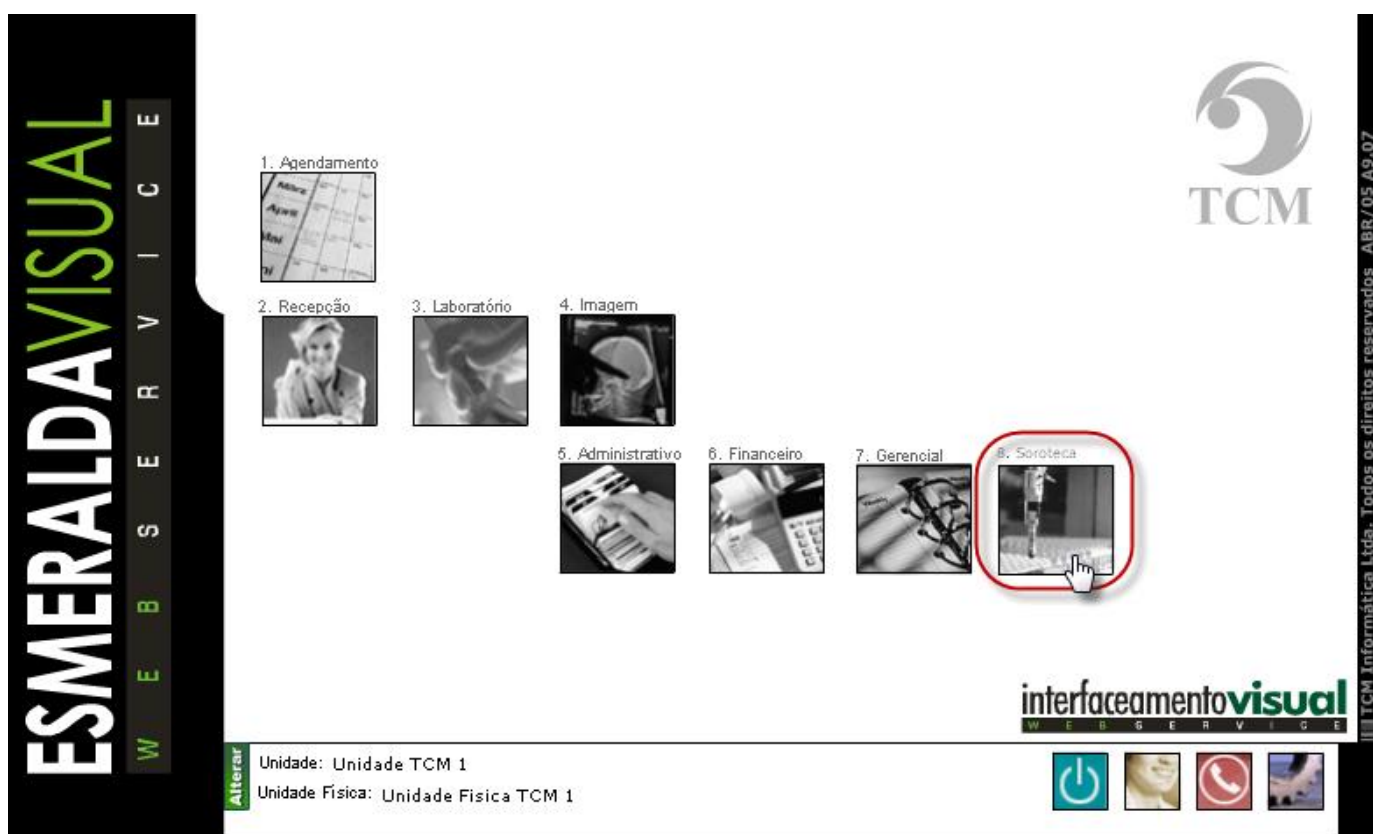

The screenshot displays the ESMERALDA VISUAL interface. On the left, a vertical banner contains the text "ESMERALDA VISUAL" and "W E B S E R V I C E". The main area features a grid of icons representing different modules: 1. Agendamento (calendar), 2. Recepção (receptionist), 3. Laboratório (microscope), 4. Imagem (X-ray), 5. Administrativo (handwriting), 6. Financeiro (calculator), 7. Gerencial (gears), and 8. Soroteca (a person in a lab coat). The "8. Soroteca" icon is highlighted with a red circle and a mouse cursor. The top right corner shows the TCM logo. The bottom of the interface includes a status bar with the text "Alterar", "Unidade: Unidade TCM 1", and "Unidade Física: Unidade Fisica TCM 1". To the right of the status bar are icons for power, a person, a phone, and a document. The bottom right corner features the "interfaceamento visual" logo and the text "W E B S E R V I C E". A vertical footer on the right edge reads "TCM Informática Ltda. Todos os direitos reservados. ABR/05 A9.07".

2) Clicar em **Amostras**.



**3) Clicar em Colocar na Geladeira.**



The screenshot shows the ESMERALDA VISUAL Sorroteca interface. The top navigation bar includes 'Início', 'Amostras', 'Cadastros', 'Consulta', and 'Relatórios'. The 'Amostras' menu is highlighted, and the 'Colocar na geladeira' option is circled in red with a mouse cursor pointing to it. The main content area is titled 'Amostras' and contains a text box with the following text:

Neste módulo estão concentradas as rotinas de: lançamento dos tubos nas estantes. Desprezo dos tubos vencidos e gerenciamento físico das geladeiras: entende-se isto pelo descarte das amostras desprezadas e a guarda das estantes lançadas.

**4) Clicar em Cadastrar.**



**ESMERALDA VISUAL**  
W E B S E R V I C E

Sorroteca

**interfaceamento visual**  
W E B S E R V I C E

Ajuda

**Início** | **Amostras** | **Cadastros** | **Consulta** | **Relatórios** |

Usuário: jaqueline

**Amostras**

Neste módulo estão concentradas as rotinas de: lançamento dos tubos nas estantes, Desprezo dos tubos vencidos e gerenciamento físico das geladeiras: entende-se isto pelo descarte das amostras desprezadas e a guarda das estantes lançadas.

5) Ao clicar em **Cadastrar**, abrirá uma tela para informar a(s) geladeira(s) que as amostras serão armazenadas. Seguir instruções abaixo.

The screenshot shows the 'Soroteca - Colocar na geladeira' window. On the left is a vertical menu with buttons: 'Criar', 'Colocar na geladeira', 'Cadastrar', and 'Desprezar'. The main window has a title bar 'Soroteca - Colocar na geladeira'. Below the title bar are two dropdown menus: 'Estante:' (1) and 'Geladeira:' (3). Between them is a button 'Alterar Estante' (2). Below the 'Estante' dropdown is a text input field for 'Código da amostra' (4) with a 'prefix' (5) label. Below this field are two buttons: 'Colocar' (6) and 'Colocar Todas' (7). At the bottom of the window are buttons: 'Reordenar' (8), 'Cancelar' (9), 'Retornar', 'Avançar', and 'Concluir' (10). Below the buttons is a table with the following columns: 'Amostra', 'Material', 'Nível', 'Coluna', 'Linha', 'Status', 'Entrada', 'Desprezar', and 'Operador'. The table is currently empty.

1) **Estante:** Selecionar a estante que desejar colocar na geladeira.

2) **Alterar Estante:** Clicar para criar uma nova estante.

3) **Geladeira:** A geladeira é selecionada automaticamente de acordo com a estante escolhida.

4) **Código da amostra:** Caso seja necessário, é possível fazer uma reconferência de todos os tubos de coleta. Utilizar o leitor de código de barras ou preencher manualmente o código da amostra que está sendo armazenada.

5) **Prefixo:** Caso seja necessário, é possível fazer uma reconferência de todos os tubos de coleta. Utilizado para o lançamento manual das amostras. O prefixo memoriza os dígitos iniciais da amostra, não havendo necessidade de preenchê-la manualmente, desta forma será necessário preencher manualmente somente os dígitos finais da amostra.

6) **Colocar:** Clicar para colocar na geladeira a amostra informada ou teclar "enter".

7) **Colocar Todas:** Clicar para colocar todas as amostras na geladeira.

8) **Reordenar:** Clicar para reordenar a lista para facilitar a operação de colocar manualmente a amostra na estante.

9) **Cancelar:** Clicar para cancelar a operação.

10) **Concluir:** Clicar para concluir o procedimento.